

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-09

LAUDA Hydro H 16

Wasserbad 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L002902

Leistungsmerkmale

- Wasserbad mit einfacher Bedienung
- TFT Display mit übersichtlicher Anzeige aller Prozessdaten
- Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0,1°C.
- Einstellung der Zeitwerte des Timers in Stunden (h) und Minuten (min).
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Digitale Sollwerteinstellung
- Einstellbare Auslösepunkte für Über- und Untertemperaturalarm bis max. +/- 10 K
- Temperaturanzeige von °C in °F umschaltbar
- 1-Punkt-Temperaturregler
- Optischer und akustischer Alarm bei Wassermangel, Über-/Untertemperatur
- sowie Fühlerbruch/-kurzschluss
- Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers
- Drei anwendungsspezifische Timerfunktionen
- Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
- Badgefäß mit Entleerungshahn
- Wärmeisolierender Deckel aus Edelstahl Rostfrei, doppelwandig mit innerer Wölbung
- verhindert das Zurücktropfen von Kondensat in die Gefäße
- Deckel und Siebboden serienmäßig



Technische Änderungen vorbehalten



Arbeitstemperatur min.
25 °C



Arbeitstemperatur max.
100 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-09

LAUDA Hydro H 16

Wasserbad 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L002902

Technische Merkmale

Arbeitstemperaturbereich	25 ... 100 °C
Umgebungstemperaturbereich	10 ... 40 °C
Temperaturkonstanz	0,1 ± K
Heizleistung max.	1,5 kW
Badgröße (BxTxH)	400 x 245 x 165 mm
Badvolumen min. / max.	7,5 / 13,9 L
Abmessungen (BxTxH)	500 x 440 x 275 mm
Gewicht	14 kg
Netzversorgung	230 V; 50/60 Hz
Netzstecker	Netzkabel mit gewinkelttem Schuko Stecker (CEE7/7)

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-09


LAUDA Hydro H 16

Wasserbad 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L002902

AUFHEIZKURVEN Temperierflüssigkeit: Wasser, Bad geschlossen

Badtemperatur °C

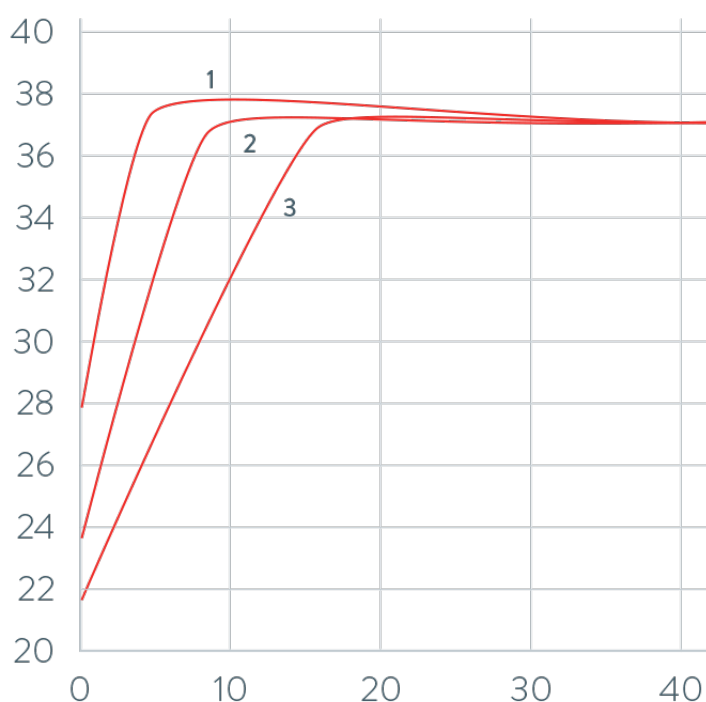

- 1 H 8
- 2 H 8 A
- 3 H 22

Aufheizzeit min

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser