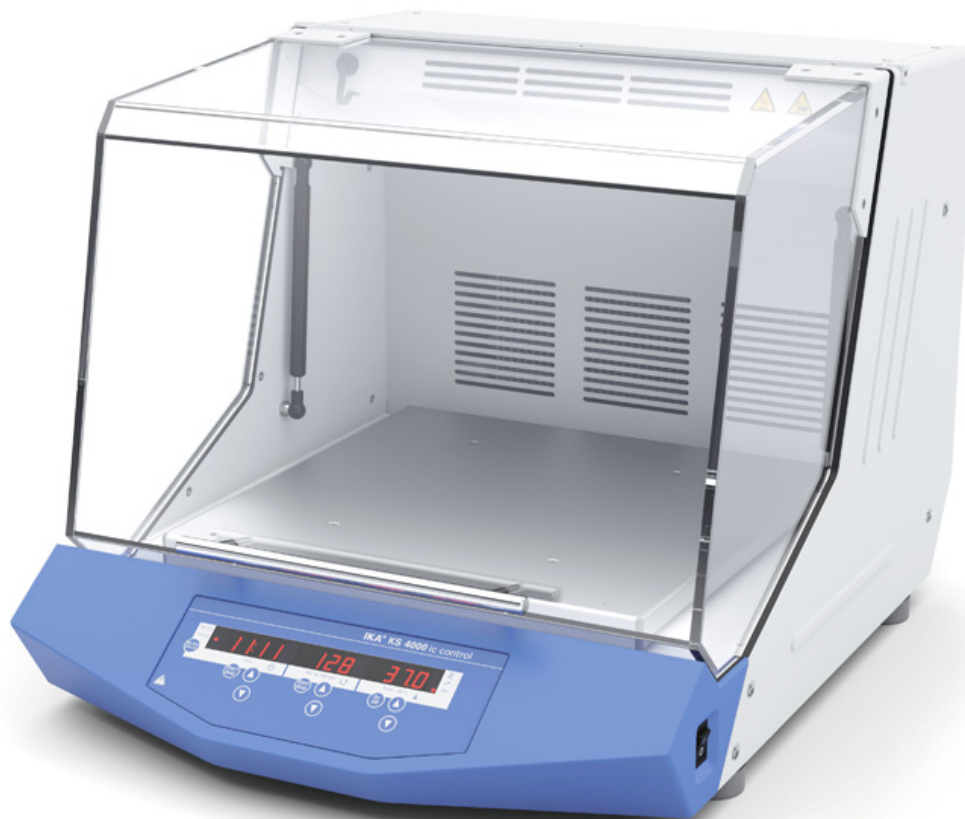




KS 4000 ic control

/// Datenblatt

Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung. Mit eingebauter Kühlschlange zum Anschluss an ein externes Kühlgerät, z.B. RC 2 basic / control.

- Große LED Anzeige für Drehzahl- und Zeiteinstellung
- Bedienelemente mit antimikrobieller Beschichtung zur Keimreduzierung
- Integrierte PID Temperaturregelung (Einsatz von zwei PT 1000 Temperaturmessfühlern)
- Innerhalb des Arbeitsraums liegende Anschlussdose für den Einsatz eines zusätzlichen Temperaturmessfühlers z.B. PT 1000.60 (im Lieferumfang enthalten)
- Elektronische Regelung von Temperatur und Drehzahl
- Elektronische Zeitschaltuhr: 0 – 999 h (Minuten- und Stundeneinstellung möglich)
- Eingebauter Kühler zum Anschluss an ein externes Kühlgerät z.B. RC 2 basic / control
- Gerät schaltet bei Störungen automatisch ab



designed for scientists

- Gerät stoppt automatisch bei geöffneter Haube
- Auffangwanne mit Ablaufschlauch an der Geräterückseite
- Einfache Bedienung
- Mit der Software labworldsoft® können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
- Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechende Aufsätze mitbestellen

Lieferumfang

- KS 4000 ic control
- PT 1000.60 Temperaturmessfühler, Edelstahl
- Clamping screws short (4 St.)
- Clamping screws long (2 St.)





designed for scientists

Technische Daten

Bewegungsart	kreisend
Schüttelhub [mm]	20
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	20
Motorleistung Aufnahme [W]	82
Motorleistung Abgabe [W]	24
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]	10
Drehzahlbereich [rpm]	10 - 500
Drehzahlanzeige	LED
Drehzahlabweichung [rpm]	±5
Einstellmöglichkeit Drehzahl	1 RPM Schritte
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	7 Segment LED
Zeiteinstellbereich [min]	1 - 59940
Betriebsart	Timer- und Dauerbetrieb
Heizleistung [W]	1000
Einstellgenauigkeit Solltemperatur [K]	0.1
Regelgenauigkeit mit Messfühler (1 Gefäß 0.5 L H ₂ O, RT 22°C, T=37°C) [K]	±0.5
Temperaturanzeige	ja
Temp. Konstanz (0,2l H ₂ O; RT 25°C, T=37°C) [K]	±0.1
Temperaturbereich (Vorlauf T<3°C) [°C]	Raumtemp. - 10° - 80°
Arbeitsbereich Innenkammer (BxHxT) [mm]	440 x 440 x 352
Gesamt Volumen der Innenkammer [l]	90
Material Gehäuse	Stahlblech bepulvert
Material Frontfolie	Polyesterfolie
Temperaturkonstanz (1 Gefäß 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) [K]	±0.05
Temperatur Homogenität (5 Gefäße 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) [K]	±0.5
Höhe bei geöffneter Haube [mm]	875
Abmessungen (B x H x T) [mm]	580 x 520 x 750
Gewicht [kg]	55
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	15 - 32
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 30
RS 232 Schnittstelle	ja
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	1120
Sicherung	2x T10A 250V

